

达愈[®]
OpenWell

苏州达愈科技有限公司品牌

通达于心 愈久愈真

达愈面针

一次性使用无菌面针·塑柄单支管装



观念递进

现今，针灸相关的临床治疗范围和应用愈来愈广泛，与之前的针灸针使用观念不同的是，近年来临床更需要进针痛感小，体感较好，无菌观念更完备的一次性针灸耗材。这种需求同时兼顾医师对于患者精细化诊疗的需求：面瘫面痛、面肌痉挛、头痛、偏头痛等高发病症的患者苦于疼痛甚至剧痛，减轻并行痛苦即针灸带来的痛感可以有效提高患者感受，减少脱落，提高依从。除高发病症外，近年对于亚健康趋势的治疗调理需求渐显，身心病症和神经内科病症年轻群体广泛，临床需要让年轻群体接受的新规格针具；对于眼周的针刺需更加安全，达愈面针可以给予精细治疗、安全精准；耳针针刺的需求亦是安全，高效，减轻痛感；因达愈面针的直径和规格的安全性和可靠性，也可以普遍用于女性和儿童的针灸治疗，尤其可以针对女性面部美容的需求；

适用范围

普遍适用于中医科、中医针灸科、康复科、美容中医科，皮肤科、眼科、五官科、身心科等科室的相关针刺治疗，通过针刺面部穴位调节经络气血运行，可辅助治疗面瘫面痛、面肌痉挛、头痛、偏头痛、过敏性鼻炎、痤疮、黄褐斑等病症，也可以微针刺微刺激辅助治疗相关科室如身心科、神经内科的植物神经功能紊乱及躯体病症，延申用于面部美容针刺，改善大小脸，紧致提升，改善法令纹等，满足临床多场景使用需求。



达愈塑柄系列

一次性无菌面针

The art of
facial
acupuncture



优势设计

一次性无菌面针


The art of
facial
acupuncture

OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 点式超声波焊接技术

达愈面针的针柄与针管通过超声波焊接，连接点仅约**1毫米**。
通过优化焊接强度，单手即可轻松将针柄从针管中取出，无需
双手操作，从而能够对特定部位进行精准治疗。此外，针柄一
旦从针管中取出便无法复位，因此使用过与未使用过一目了然。

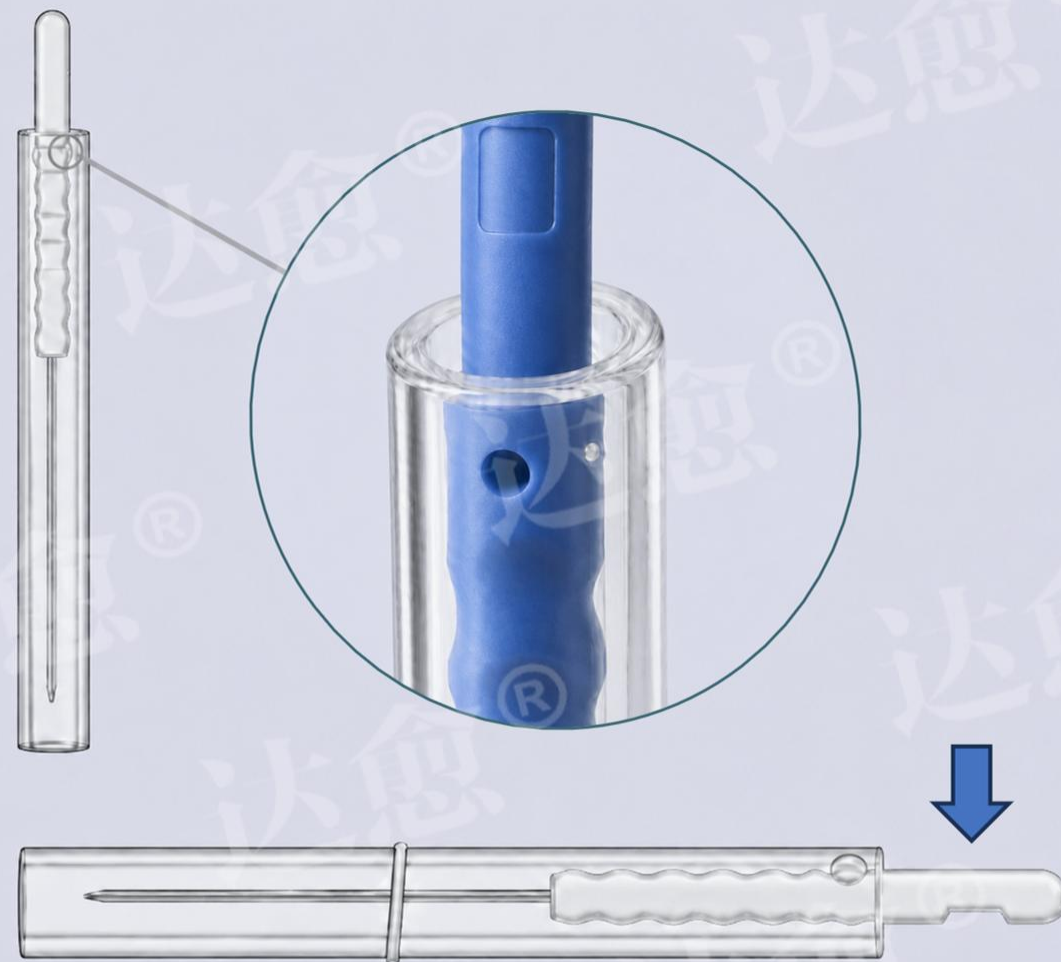

OpenWell

苏州达愈科技有限公司


1

超声焊接点

3

2

剥离后断端面

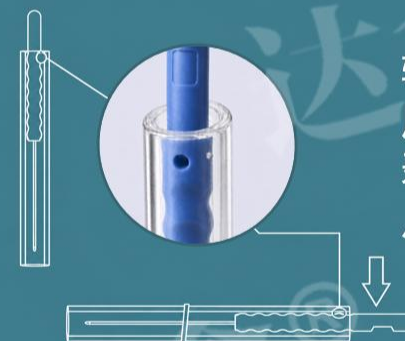

核心材质为06Cr19Ni10(SUS304)奥氏体医用不锈钢丝，不锈钢丝严格追溯性质量控制，具备独特的矫正加工技术，形成高度直线的钢耗材加工

奥氏体钢

06Cr19Ni10

针尖研磨技术，高精度机工结合，打造出均匀、圆润、光滑的针尖形状，最大限度减少疼痛感；子弹头针尖，SEM电镜下100nm单位入针丝滑无毛刺，0.10mm直径的面针无明显痛感，针尖穿刺力符合中国、日本国际标准；清洗工序无尘纯水车间；清洗完成后对针尖的彻底检查，100%所有批次逐个检查

针尖优势

needle point

20 μ m

ZEISS

美国道康宁（Dow Corning，现陶氏化学旗下 Liveo™ 品牌）的医用级硅油在高端无痛针灸针（如美颜针、日式无痛针）的制造中扮演着决定性的核心角色。它主要作为针尖与针体表面的超薄润滑涂层，也是现代一次性无菌针灸针实现“无痛进针”的核心技术所在。达愈面针的针尖针体采用美国进口道康宁DowCorning系列硅油，且出厂前硅油擦净，润针的同时不会因为硅油过量对皮肤造成影响。

进口硅油

Liveo™

针柄采用一体注塑成型手柄，采用独特纹理抗滑设计，进针而不易脱手，且达愈对面针的不同规格进行颜色编码，可以按照针柄颜色识别规格，方便治疗；圆头针管，传统针管切口边缘锋利，达愈针管采用独立注塑成型工艺，末端圆润，尺寸规格一致，使临床工作者更容易握持，并温和作用于患者皮肤，不易划伤；

圆端注塑

Injection
molding
process

新型环保包装，使用拿取方便，独立单只包装，不会交叉污染。无独立纸制说明书，使用说明印于针盒包装内侧；环氧乙烷灭菌处理（EOG）；透析纸易撕，每个无菌透析纸背面印有尺寸、灭菌批号和有效期，通过查询可以追溯出货检验记录、灭菌记录等，符合一次性无菌使用观念；

As e p t i c
p a c k a g i n g
无 菌 封 装



极细针尖



全规格



OpenWell
达愈®

一次性使用无菌面针 标准规格示例

所有规格:

0.10*15mm 蓝色柄 0.10*7 0.10*10 0.10*25 0.10*30

0.12*13mm 紫色柄 0.12*7 0.12*10 0.12*23 0.12*28

0.14*13mm 绿色柄 0.14*7 0.14*10

0.14*23mm 绿色柄 0.14*28

0.16*13mm 橘红柄 0.16*7 0.16*10

0.16*28mm 橘红柄 0.16*23

0.18*13mm 灰色柄 0.18*7 0.18*10

0.18*28mm 灰色柄 0.18*23



达愈®

OpenWell
苏州达愈科技有限公司

OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 标准规格示例

(标注 ● 为右图规格)

规格/Specifications

直径 \ 长度	7mm	10mm	13mm	15mm	23mm	25mm	28mm	30mm
0.10mm	○	○	○	●	○	○	○	○
0.12mm	○	○	○	○	○	○	○	●
0.14mm	○	○	○	●	○	○	○	○
0.16mm	○	○	○	●	○	○	○	●
0.18mm	○	○	○	●	○	○	○	○
0.20mm	○	○	○	○	○	○	○	○

数值全球各个国家有所差异，为大约数，具体以图表所写的国际单位米制为准。



OpenWell

达愈® “无菌观念” 与 一次性使用无菌面针

近代针灸复兴者承淡安先生曾于20世纪30年代赴日考察针灸教育与临床体系，学习日本针灸学校化、规范化的办学经验，并接触日本细针、管针等精细化操作传统。回国后，他创办针灸讲习所、针灸疗养院及中国针灸医学专门学校，推动中国针灸从师承经验走向近代教育体系。

他推动了针灸从传统经验操作向近代医学规范靠拢，其中自然包括对清洁、消毒、操作规范的重视；现代“无菌包装、单支灭菌、一次性使用、防交叉感染”的完整体系，是后来伴随现代医疗器械工业、传染病防控和法规标准逐步形成的。



OpenWell

达愈® “无菌观念” 与 一次性使用无菌面针 “一次性针灸针”

1953年，承淡安先生在中国倡导以不锈钢制造针灸针，中国开始出现现在临床上常用的精细、柔韧的不锈钢针灸针。

现代一次性无菌针灸针在20世纪后期由日本医疗器械企业推动产业化，在1978年前后开始开发一次性针灸针，并于1980年推出一次性使用针灸针，使针灸工具进一步走向**标准化、无菌化**和**医疗器械化**。



OpenWell

达愈® “美容针灸” 与 一次性使用无菌面针 “面针” 溯源

美容针灸的思想源头，可追溯至**中国古代医学**对“颜面、皮肤、气血、经络、脏腑关系”的认识。《**黄帝内经**》奠定了中医养颜抗衰老的理论基础，《**针灸甲乙经**》则系统保存了头面部腧穴及针灸主治经验。进入近现代后，**日本**针灸以细针、管针、轻刺激和无痛化操作见长，推动“**美容鍼**”形成现代化、体验化的面部抗衰老服务；**韩国**则进一步将**东方医学与皮肤管理、医美消费场景**结合，形成当代东方美容医学的重要分支。



OpenWell

达愈® “美容针灸” 与 一次性使用无菌面针 “面针” 溯源

2016年后，江苏、上海的从业者们、医生们以及国内的针灸工厂，又一次将日本、韩国对于美容针灸的**产业标准化**和**消费场景**带了回来，并慢慢在影响着人们对于针灸的特定使用习惯，2025年，公司认识到市场的迫切需求，我们开发出“**一次性使用无菌面针**”，并积极在全球范围内推动技术培训活动与学术交流，这符合 OpenWell达愈 一以贯之的经营理念，礼贤聚力，我们愿与每一位创业伙伴和客户并肩前行，把更安全、更专业、更美好的针灸医疗产品，带向中国针灸医疗的明天。



OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 资质编码类目示例

医用耗材代码：C1302011790000213765

医疗器械注册备案证：苏械注准20252201738

医疗器械生产许可证：苏药监械生产许20190023号

注册备案产品名称：一次性使用无菌面针

耗材分类：中医类材料/针具/针具/针具类/不区分/针灸针

单件产品名称：一次性使用无菌面针

品牌企业：苏州达愈科技有限公司



生产企业：苏州市仲景生命科技有限公司

规格：0.10x15mm（例）

型号：塑柄针，100支装，带进针管



OpenWell
苏州达愈科技有限公司

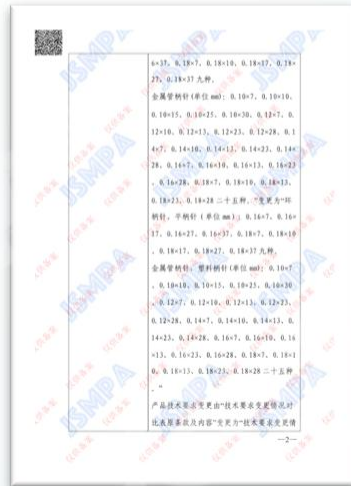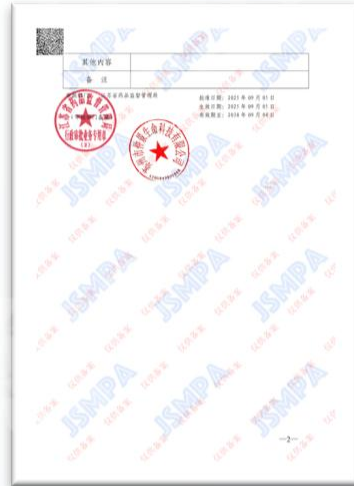



皮肤致敏试验

皮肤(内)途径动物刺激试验



急性全身毒性试验

体外细胞毒性试验 (MTT法)





美国注册



GMP认证企业生产



欧盟认证



日本认证



达愈[®]
OpenWell

苏州达愈科技有限公司品牌

通达于心 愈久愈真